



SoundPoint ist ein neues Softwarefeature, das Hand in Hand mit der Inspire Anpass-Software und einem iPad als Bedienoberfläche für den Hörsystemträger arbeitet. Um ein iPad als Bedienoberfläche erfolgreich einsetzen zu können ist ein drahtlos Netzwerk notwendig, mit welchem sowohl iPad als auch der Inspire Anpass-PC verbunden sind. Sind iPad und PC im gleichen Netzwerk, kann der Hörsystemträger Echtzeit-Veränderungen zum Klangeindruck durch Führen des Zeigefingers über den Touchscreen des iPads vornehmen. Nachfolgend werden die Anforderungen und das Anschließen bzw. Verbinden des iPads über ein drahtlos Netzwerk beschrieben.

SoundPoint und das iPad = Inspire + Wi-FiNetzwerkzugang + iPad

Die Verwendung eines iPads als Bedienoberfläche erfordert folgendes Setup:

- Wi-FiVerbindung/Zugang des iPads in einem lokalen Netzwerk.
 - Eine Internet Verbindung ist nur notwendig um die SoundPoint Applikation aus dem App Store zu laden.
- Ein PC mit der aktuellen Inspire Anpasssoftware, der mit dem gleichen lokalen Netzwerk verbunden ist wie das iPad.
 - Der Inspire Anpass-PC kann drahtlos oder kabelgebunden mit dem Netzwerk verbunden sein.



Schritt 1: Download der SoundPoint Applikation für das iPad

- Für diesen Schritt ist eine Internetverbindung notwendig!
 - Verbinden Sie das iPad mit dem Internet über ein bestehendes Netzwerk in Ihrem Fachgeschäft oder zu Hause.
- Über das iPad den App Store aufrufen
 - Öffnen Sie den App Store via iPad und suchen Sie nach „SoundPoint“.
 - Downloaden Sie die SoundPoint App vom App Store.

Schritt 2: Die Verbindung

Option 1: Mit einem bereits existierenden Netzwerk verbinden.

Ein Wi-Fi und lokales Netzwerk existiert bereits

Ist der Inspire Anpass-PC innerhalb des gleichen Wi-Fi Netzwerks wie das iPad, wird kein neuer zusätzlicher Wi-Fi Zugang benötigt. Sind die gleichen Netzwerkeinstellungen des lokalen Netzwerkes aktiviert, lässt sich die SoundPoint Applikation des iPads ganz leicht mit dem PC verbinden. Dies ist unabhängig von einer drahtlosen oder kabelgebundenen Netzwerkverbindung des PCs.

■ Bitte beachten Sie:

- Das Netzwerk muss Multicast (Senden von Informationen an mehrere Teilnehmer) und Peer-to-Peer (Kommunikation mehrerer Rechner in einem Netzwerk) Anwendungen unterstützen.
 - Öffentliche Hot Spots und Wi-Fi Zugänge wie z.B. in Hotels, Cafés u. Ä. sind nicht geeignet, da sie weder Multicast noch Peer-to-Peer Anwendungen unterstützen.
 - Ihr Netzwerk ist bei der Einrichtung von Ihnen durch ein Passwort geschützt worden: Halten Sie dieses bereit.
 - Zur Netzwerkeinstellung benötigen Sie möglicherweise Ihren IT Support.
- Über die Wireless Einstellung im Menü Einstellungen wird das iPad mit dem bestehenden Netzwerk verbunden.
- Dieser Schritt gewährleistet eine Kommunikation zwischen iPad und dem Inspire Anpass-PC während der SoundPoint Sitzung.



SoundPoint via iPad Touchscreen bedienen

Option 2: Einen neuen Wi-Fi Netzwerk Zugang erstellen (Internetzugang ist nicht notwendig).

Es existiert noch kein Wi-Fi Netzwerk

Dieses Szenario erfordert im ersten Schritt das Hinzufügen eines Wi-Fi Zugangs. Im Büro oder dem Anpassraum wird ein Mini Netzwerk eingerichtet, indem der Anpass-PC und das iPad durch SoundPoint verbunden sind.

- Notwendige Komponenten:
 - Wi-Fi Zugang: Hierbei handelt es sich um eine Hardware, die es erlaubt ein Wi-Fi Netzwerk zu kreieren. Zwei Beispiele finden Sie unten aufgelistet. Geräte wie diese sind einfach zu installieren und verfolgen das Plug&Play Prinzip. Sie folgen einfach nur den Installationsanweisungen des jeweiligen Modells. Diese Geräte werden ähnlich schnell wie Drucker ständig upgedatet.

Apple AirPort Extreme

<http://store.apple.com/de/product/MC340Z/A/AirPort-Extreme?node=MTY1NDA0Mg&mco=MTM4NTQ4MTQ>

D-Link Wireless Access Point

http://accessories.euro.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=de&l=de&s=dhs&cs=dedhs1&sku=A2134318&~ck=baynoteSearch&baynote_bnrnk=0&baynote_irrank=0

- Inspire PC: Verbinden Sie Ihren Anpass-PC mit dem Wi-Fi Netzwerk gemäß den Herstellerangaben. Die Verbindung kann typischerweise durch eine interne Wireless Antenne, einen USB Wireless Adapter oder ein physisches Ethernet Kabel hergestellt werden.
- iPad Bedienoberfläche: Über Wireless Einstellungen des iPads kann dieses mit dem Netzwerk, in welchem sich auch der PC befindet verbunden werden.
- Durch die Verbindung sind PC und iPad in der Lage via SoundPoint miteinander zu kommunizieren.

Wir sind für Sie da:

Starkey-Kundendienst


José Arminio, Gilbert Goertz, Michael Jacobi,
Viola Kummerfeldt, Michael Sydow
Tel. 040 429473-350
Fax 040 429473-255
E-Mail: customer_service@starkey.de

Starkey-Training


Gerd Bannert, Sylvie Gerber
Tel. 040 429473-350
Fax 040 429473-255
E-Mail: training@starkey.de

Schritt 3: Aktivierung SoundPoint

- Starten Sie die SoundPoint Applikation auf dem iPad.
 - Das iPad zeigt folgenden Hinweis an: "Waiting for Inspire to choose [iPad Name]".
- Starten Sie Inspire auf dem Anpass-PC in dem entsprechenden Kunden und verbinden Sie die HörSysteme.
- Starten Sie die SoundPoint Anwendung im QuickFit Bildschirm der Inspire-Anpasssoftware.
- Nachdem SoundPoint geladen wurde, wählen Sie aus der Auswahlliste die entsprechende iPad "Fernbedienung" aus

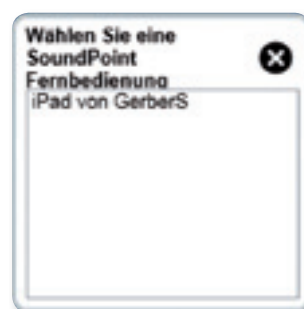

- Das iPad ist nun verbunden und die intuitive Bedienoberfläche steht für Einstellungen zur Verfügung.

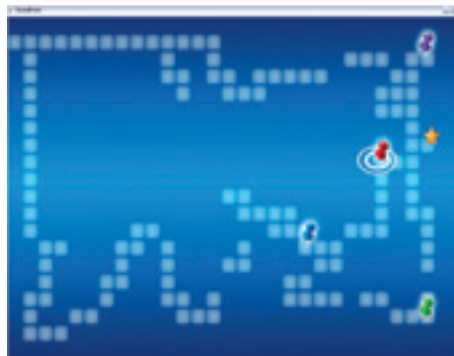

Besser hören, mehr vom Leben

